

**ELEKTROLYT-SALBE S**

MEDIZINPRODUKT

**NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** ist eine Wund- und Heilsalbe zur äußerlichen Anwendung für die Heilung von Verletzungen der Haut.

- Fördert die Wundheilung
- Mindert den Schmerz
- Beugt Infektionen vor
- Reduziert die Schwellung
- Reduziert die Narbenbildung
- Für Kinder geeignet

**Anwendungsgebiete:** Verletzungen der Haut (z.B. Schnitt-, Schürf-, Riß- und Quetschwunden), Verbrennungen 1. und 2. Grades (auch bei Sonnenbrand), Verletzungen, Reizungen oder Entzündungen der Haut am Darmausgang (z. B. Analfissuren, Hämorrhoiden Grad I), zur Behandlung von Narbengewebe und stumpfen Traumen. Auch zur Pflege der beanspruchten oder trockenen, rissigen Haut und Altershaut.

**Eigenschaften:** Die **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** dient zur Einstellung eines optimalen physikalischen Milieus zur Heilung verletzter Haut. Dadurch werden Blutergüsse und Ödeme beschleunigt abgebaut, die Schwellung reduziert und damit die Schmerzen gelindert. Die Neubildung von Gewebe wird unterstützt, die Heilung nach Operationen oder Verletzungen (Wunden, Verbrennungen, Sonnenbrand) verbessert und die Narbenbildung verringert.

**Anwendung:** Vor und nach der Behandlung Hände waschen. Sofern erforderlich, die Wunde reinigen (z.B. mit **NAWA®** Wundspray). **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** ca. 2 mm dick auf die verletzte Haut bis ca. 2 cm über die Wundränder hinaus auftragen. In den ersten drei Tagen nach der Verletzung mehrmals täglich anwenden.

**NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** kann auch in Verbindung mit einem handelsüblichen Verbandstoff angewandt werden. Durch das Abdecken der verletzten Haut mit einem Verbandstoff wird die Wunde zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt, die die Heilung stören könnten.

**NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** enthält keine hautreizenden Substanzen und kann am Mund- und im Schleimhautbereich (z.B. Nase) angewendet werden.

**Dauer der Anwendung:** Die Anwendung richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.


**Kontraindikation und Nebenwirkungen:** Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbrennungen ab Grad 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.


**Sicherheitshinweise:** Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen. Auf hygienische Entnahme achten. Vor Frost und Hitze schützen. Tube nach Gebrauch verschließen. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Temperaturbegrenzung beachten. Trocken aufbewahren. Gebrauchsanweisung beachten. Auf unbeschädigte Versiegelung achten.

**Haltbarkeit:** 3 Jahre nach Herstellung

**Packungsgrößen:** 100 g, 20 g Tube; 5 g Sachtet

**Aufbrauchfrist: Tube:** Nach dem Öffnen sollte **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht werden. / **Sachtet 5g:** Das Produkt ist nur zur Einmalanwendung bestimmt. Nach dem Öffnen sollte **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S Sachtet** sofort aufgebraucht werden, um Verunreinigungen vorzubeugen.

**Chargenbezeichnung/**  **LOT**: auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in Tubenfalz/Sachtetrand eingepägt

**Verfalldatum/**  : auf Boden der Faltschachtel aufgedruckt und in Tubenfalz/Sachtetrand eingepägt

# ELEKTROLYT-SALBE S

Medical Device

**NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** is a wound healing cream for external use for the healing of injuries to the skin.

- Promotes wound healing
- Reduces swelling
- Alleviates pain
- Reduces scar formation
- Infection prevention
- Suitable also for children

**Indications:** Injuries of the skin (e.g. cuts, abrasions, lacerations and contusions), 1st and 2nd degree burns (also for sunburns), irritation or inflammation of the skin at the anus (e.g. anal fissures, hemorrhoids stadium 1), for the treatment of scar tissue and blunt traumas. Also, for the care of exposed or dry, cracked and aged skin.

**Characteristics:** **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** creates an optimal physical environment for the healing of injuries to the skin. Thus hematoma and edema were degraded, healing accelerated, swelling reduced and thereby pain relieved. The formation of new tissue is supported, the healing after surgeries or injuries (wounds, burns, sunburns) enhanced and scar formation reduced.

**Directions for use:** Wash hands before and after treating a wound. If necessary clean the wound carefully (e.g. with **NAWA® Wundspray**). Apply **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** generously onto wound area and over the wound margin. Repeat several times a day for the first three days after injury.

**NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** may be used in combination with a customary dressing. By covering injured skin with a bandage the wound is protected additionally from external influences which could disturb the healing process.

**NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** contains no skin irritating substances and can be used on the mouth and on mucous membranes (e.g. nose).

**Duration of use:** The duration of use is based upon type and severity of the injury.



**Contraindication and side effects:** Do not use with hypersensitivity to any of the ingredients. A doctor should be consulted with burns second b or third degrees. Application for pregnant or breastfeeding women, babies and toddlers/young children should only be carried out with mandatory indication after consultation of a doctor.

**General safety instructions:** For external use. Do not swallow. Look after hygienic extraction of the salve. Protect against frost and heat. Close tube after use. Do not use damaged packages. Keep out of the reach of children. Protect from sunlight. Do not use after expiration date. Consider temperature limit. Keep in a dry place. Consider instructions for use. Pay attention to intact sealing.

**Shelflife:** 3 years after manufacturing

**package sizes:** 100 g, 20 g tube; 5 g sachet


**Time limit to use: tube:** Once opened **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S** should be used within 3 months.  
**/ Sachet 5g:** The product **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S Sachet** is intended for single use only. Once opened **NAWA® MEDICAL ELEKTROLYT-SALBE S Sachet** should be used immediately to avoid contamination.

**Batch code/  and Expiry date/ ** : printed onto bottom of folding box and stamped onto tube fold/sachet edge

**Inhaltsstoffe/Ingredients (INCI):**

Aqua purificata, Octyldodecanol, Hydrogenated Palm Glycerides, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Cetyl Alcohol, Methylparaben (and) Propylparaben (and) Sorbic Acid (and) Dehydroacetic Acid, Trace elements (zinc, iron)

CE 0197

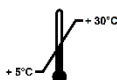

e 100 g

e 20 g



e 5 g Sachet



**NAWA® HEILMITTEL GmbH**  
 Ostendstraße 100 · D-90482 Nürnberg  
 Telefon: +49 (0) 911-544 41-0  
 Telefax: +49 (0) 911-544 41-11  
 E-Mail: info@nawa.com  
 www.elektrolyt-salbe.de

Made in Germany

REV 052020