



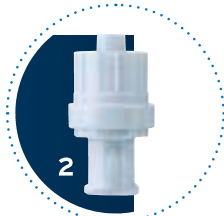

PUMPEN- UND SCHWERKRAFTINFUSION

Infudrop matic P

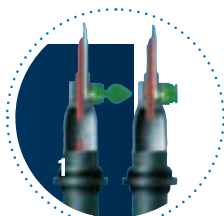

Infusionsgeräte mit automatischer Belüftung und Safety-Air-Vent Sicherheitsventil für die Druck- und Schwerkraftinfusion

- Mikroglatter Einstechdorn
- Integrierte, verschließbare, automatische Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- Safety-Air-Vent Sicherheitsventil schützt den Luftfilter vor Kontakt mit der Infusionslösung. Die Ventil-/Filter-Kombination erleichtert die Belüftung speziell bei Fett- und Alkohollösungen und vereinfacht die Handhabung. Ein Benetzen und Verkleben des Bakterienfilters ist ausgeschlossen. Die zusätzliche Verschlussklappe schützt den Bakterienfilter vor Beschädigungen (Abb. 1)
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Erhältlich mit kanülenfreiem, geschlossenem Zugangssystem K-NECT für intermittierende Injektion und Verbindungen ohne Kanülen (Abb. 3)
- Infudrop® matic P-BCV: erhöhte Sicherheit durch endständige Rückflusssperre (Abb. 2)
 - Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z.B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
 - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionsgerät bei einer Infusionsunterbrechung
- LuerLock
- Flow Stop-Kappe verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung; vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch reduziertes Kontaminationsrisiko (Abb.4)

Artikel	Länge [cm]	Injektion	Rückflusssperre	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop matic P	180			100	M48451520	09764408	-
Infudrop matic P	240			100	M48441617	09764383	-
Infudrop matic P BCV	180		•	100	M48454520	09764472	-
Infudrop matic P BCV	240		•	100	M48451535	09764414	-
Infudrop matic P K-NECT	180	K-NECT		100	M48403570	10087278	-

latex-frei
DEHP-frei

Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 60-61